

BioWhiten for Aligners - Instructions for Use

For maximum results, follow the instructions carefully. If you have questions, feel discomfort or to stop treatment, please consult your dentist. Crowns, veneers, fillings, dentures and restorations will not whiten and may require replacement following the whitening procedure.

Note (Before you use BioWhiten for Aligners): If you experience sensitivity, pain, or have any concerns before using this product, contact your dentist. To minimize potential discomfort associated with clear aligner treatment, refrain from using this whitening product for the first two weeks after receiving your initial set of clear aligners and for the first two days following each subsequent aligner change. Patients with amalgam fillings may observe a temporary dark purple discoloration in their trays; this is a normal occurrence and does not affect treatment efficacy.


1. Before whitening, brush your teeth with toothpaste and rinse.
2. Remove the cap of the Whitening Syringe and install the application mixing tip.
3. Apply the gel inside the aligner tray in a continuous bead, filling about one-quarter to one-third of the tray height. Typically, it should be lentil size for each teeth. Apply the gel along the cheek side of the tray for all teeth.
4. Dry your teeth with a clean soft napkin or cloth. If you can, also try to dry your teeth by pulling air.
5. While looking in a mirror, place the Aligner Tray that you have prepared with the gel in your teeth and press it to fit firmly. A small amount of gel may overflow. Clean this overflowing gel with a napkin.
6. The aligner tray should remain in your mouth for at least 45 min or 1 hour. Repeat this process once a day for 10 consecutive days. Each syringe contains enough gel for approximately 4-5 days of treatment. Consult your dentist for the recommended number of treatments.
7. Once finished placing gel in trays, remove mixing tip from syringe and replace with the plastic cap.
8. After each application, Cleanup Rinse and clean the aligner tray with a toothbrush and water. Do not use trays as wet and always dry them before use it
9. Rinse and brush your teeth to remove excess gel.

This product is for professional use only. Warnings & Precautions for Patients:

- If you have allergies and in case of an allergic reaction, rinse thoroughly and seek medical advice.
- Avoid direct contact of the whitening gel with the gums and excessive salivary flow.
- Some users may experience temporary discomfort in the gums, lips, throat, tongue, or teeth. If discomfort persists, discontinue use and contact your dentist.
- Avoid swallowing large amounts of gel. If ingested, drink plenty of water and contact a physician. If aspirated, seek immediate medical attention.
- Pregnant or nursing women should not use whitening products.
- Teeth may re-stain over time. Touch-up treatments may be needed.
- Avoid eye contact; if exposure occurs, rinse immediately.
- Use only with aligners, retainers, or Whitening Trays.
- Do not eat, drink, or use tobacco while wearing the whitening trays.
- Dispose of used syringes and tips properly.

For Dental Professionals:

- Avoid treatment in patients at risk of swallowing or aspirating the tray.
- It is recommended to use this product towards end of each clear aligner replacement periods. e.g. 2 syringes at the beginning of aligner treatment and 1 syringe per every second or third aligner replacement cycle during the entire aligner treatment period.
- Pre- and post-treatment with desensitizing gels, fluoride varnish, or sensitivity relief toothpaste is recommended for patients with known sensitivity.
- Restorative materials such as crowns and fillings will not whiten. Plan whitening treatments before restorative procedures.
- Wait 7-10 days after whitening before placing adhesive restorations.
- Evaluate gingival and oral health before treatment to prevent irritation.
- Avoid enamel etching or polishing before whitening as it may increase sensitivity.
- White spot lesions may become more visible. Continue treatment until color blends, then re-evaluate after two weeks.
- Ensure restorations are sealed and exposed dentin is covered. Use desensitizers or remineralization agents such as BioWhiten NanoCare, if necessary.
- Monitor progress to prevent excessive whitening or translucency.
- Inform patients that some teeth may not whiten effectively and that existing dental work will remain unchanged in color.

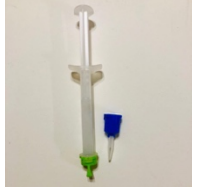

CAUTION:

- Do not bend, crush, or deform any material that comes out of your kit. Store the box as you open it.
- Store the Whitening tray and use it to make the whitening again after about 3 months
- Store whitening gels in the refrigerator but do not freeze in the freezer. Store the gel at 2 ° C - 10 ° C (36 ° F to 50 ° F).
- Keep BioWhiten whitening gel for 15-20 minutes at room temperature before use. Keep it in the refrigerator again after use.
- Keep out of reach of children.
- If you experience sensitivity or have any concerns, contact your dental professional.

This product is designed for use with clear aligners, retainers, or Whitening Trays. If a serious reaction occurs, report it to the manufacturer and local authorities.

BioWhiten for Aligners - Instructions for Use

Maksimum sonuç almak için talimatları dikkatlice takip edin. Sorularınız varsa, rahatsızlık hissediyorsanız veya tedaviyi durdurmak istiyorsanız, diş hekiminize danışın. Kaplamalar, porselenler, dolgular, takma dişler ve restorasyonlar beyazlamaz ve beyazlatma işleminden sonra değiştirilmesi gerekebilir.

Not (Kullanmadan Önce): Eğer hassasiyet, ağrı hissediyorsanız veya bu ürünü kullanmadan önce herhangi bir endişeniz varsa, diş hekiminize danışın. Şeffaf plak tedavisiyle ilişkili olası rahatsızlıkları en aza indirmek için, ilk set şeffaf plaklarınızı aldıktan sonraki ilk iki hafta boyunca ve her plak değişiminden sonraki ilk iki gün boyunca bu beyazlatıcı ürünü kullanmaktan kaçının. Amalgam dolgusu olan hastalar, plaklarında geçici olarak koyu mor bir renk değişimi fark edebilirler; bu normal bir durumdur ve tedavinin etkinliğini etkilemez.

Kullanım Talimatları:

1. Beyazlatma işleminden önce dişlerinizi diş macunu ile fırçalayın ve ağızınızı durulayın.
2. Beyazlatma şırıngasının kapağını çıkarın ve karıştırma ucunu takın.
3. Jeli, plak içine sürekli bir çizgi halinde uygulayın, plak yüksekliğinin yaklaşık dörtte biri ile üçte biri kadar doldurun. Genellikle her diş için mercimek büyüklüğünde olmalıdır. Jeli, tüm dişler için plağın yanak tarafına uygulayın.
4. Dişlerinizi temiz, yumuşak bir peçete veya bez ile kurulayın. Mümkünse, hava çekerek dişlerinizi kurutmaya çalışın.
5. Aynaya bakarak, jeli sürerek hazırladığınız aligner plağını dişlerinize yerleştirin ve sıkıca oturmasını sağlayın. Küçük miktarda jel taşabilir. Bu taşan jeli bir peçete ile temizleyin.
6. Beyazlatma plağı ağızınızda en az 45 dakika veya 1 saat kalmalıdır. Bu işlemi, 14 gün boyunca günde bir kez tekrarlayın. Her şırınga yaklaşık 4-5 günlük tedavi için yeterli jel içerir. Önerilen uygulama sayısı ve süresi için diş hekiminize danışın.
7. Plağa jel koyma işlemi tamamlandıktan sonra, şırınganın karıştırma ucunu çıkarın ve plastik kapağı yerine geri takın.
8. Her uygulamadan sonra, plakları temizleyin ve bir diş fırçası ile su kullanarak durulayın. Plakları ıslak halde kullanmayın, her zaman kurutarak kullanın.
9. Ağızınızı çalkalayın ve fazla jeli temizlemek için dişlerinizi fırçalayın.

Bu ürün yalnızca profesyonel kullanım içindir. Hastalar için Uyarılar & Önlemler:

- Alerjiniz varsa ve alerjik bir reaksiyon durumunda ağızınızı iyice durulayın ve tıbbi yardım alın.
- Beyazlatma jelinin diş etleriyle doğrudan temasından ve aşırı tükürük akışından kaçının.
- Bazı kişiler diş etlerinde, dudaklarda, boğazda, dilde veya dişlerde geçici rahatsızlık hissedebilir. Rahatsızlık devam ederse, kullanımı bırakın ve diş hekiminize danışın.
- Büyük miktarda jel yutmaktan kaçının. Eğer yutulursa, bol su için ve bir doktora danışın. Solunum yoluna kaçması durumunda derhal tıbbi yardım alın.
- Hamile veya emziren kadınlar beyazlatma ürünlerini kullanmamalıdır.
- Zamanla dişler yeniden lekelenebilir. Ara ara tekrar beyazlatma jeli kullanmanız gerekebilir.
- Göze temasından kaçının; temas halinde hemen durulayın.
- Sadece şeffaf plaklar, retainerlar veya beyazlatma plakları ile kullanın.
- Beyazlatma plaklarını kullanırken yemek yemeyin, içecek tüketmeyin veya tütün ürünleri kullanmayın.
- Kullanılmış şırıngaları ve uçları uygun şekilde imha edin.

Diş Hekimleri İçin:

- Plağı yutma veya solunum yoluna kaçırma riski olan hastalarda tedaviden kaçının.
- Bu ürünün, her şeffaf plak değişim döneminin sonunda kullanılması önerilir. Örneğin, plak tedavisine başlarken 2 şırınga ve ardından her ikinci veya üçüncü plak değişiminde 1 şırınga kullanılması önerilir.
- Hassasiyeti bilinen hastalar için tedavi öncesinde ve sonrasında hassasiyet giderici jeller, flor verniği veya hassasiyet önleyici diş macunları kullanılması önerilir.
- Kaplamalar, dolgular gibi restoratif malzemeler beyazlamaz. Beyazlatma tedavilerini restoratif işlemlerden önce planlayın.
- Beyazlatma sonrası yapıştırmalı restorasyonlar uygulamadan önce 7-10 gün bekleyin.
- Tedavi öncesinde diş eti ve ağız sağlığını değerlendirin, tahrişi önlemek için gerekli önlemleri alın.
- Beyazlatma öncesinde mine aşındırma, detertraj veya polisaj işlemlerinden kaçının; bu hassasiyeti artırabilir.
- Beyaz lekeler daha belirgin hale gelebilir. Dişlerin renkleri iyice açılana kadar tedaviye devam edin ve iki hafta sonra yeniden değerlendirin.
- Restorasyonların iyi kapatıldığından ve açıkta kalan dentinin örtüldüğünden emin olun. Gerekirse, hassasiyet giderici veya BioWhiten NanoCare gibi remineralizasyon ajanları kullanın.
- Aşırı beyazlatmayı veya şeffaflaşmayı önlemek için süreci takip edin.
- Hastalara, bazı dişlerin etkili şekilde beyazlamayabileceğini ve mevcut dental restorasyonları renginin değişmeyeceğini bildirin.

DİKKAT:

- Kitinizden çıkan herhangi bir malzemeyi bükmeyin, ezmeyin veya deforme etmeyin. Kutuyu açtığınız şekilde saklayın.
- Beyazlatma plağını saklayın ve yaklaşık 3 ay sonra yeniden beyazlatma yapmak için kullanın.
- Beyazlatma jellerini buzdolabında saklayın ancak dondurucuya koymayın. Jeli 2°C - 10°C (36°F - 50°F) arasında muhafaza edin.
- Beyazlatma jelini kullanmadan önce 15-20 dakika oda sıcaklığında bekletin. Kullanımdan sonra tekrar buzdolabına koyun.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Hassasiyet yaşarsanız veya herhangi bir endişeniz olursa, diş hekiminize danışın.

Bu ürün, şeffaf plaklar, retainerlar veya beyazlatma plakları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ciddi bir reaksiyon meydana gelirse, üreticiye ve yerel yetkililere bildirilmelidir.

